


NarcoCheck

ID-Test®

Drug Identification Test



www.narcocheck.com

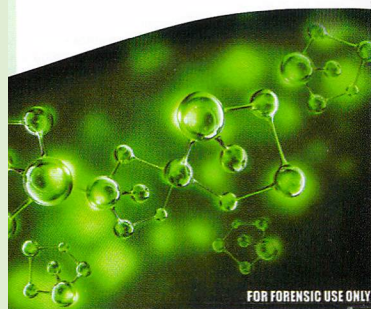

CANNABIS / THC

REF: IDT-THC-xx

	THC, Hashich, Marijuana		Negative
	Instant bright red / Rouge vif immédiat		Négatif
	Rojo vivo inmediato / Sofortiges Hellrot		Negativo
	Rosso vivo immediato		Negativ

COCAINE

REF: IDT-COC-xx

		Cocaine
--	--	---------

COCAINE ADULTERANTS

REF: IDT-CADU-xx

	Ibuprofen		Vitamin-C		Levamisole
	Ephedrine		Lidocaine		Benzocaine
	Phenacetine, Aspirin, Acetaminophen (paracetamol)		Procaine		

DESIGNER DRUGS

REF: IDT-DDR-xx

		Camfetamine, Fluro(meth)amphetamine (4-FA, 4-FMP, 4-FMA) & 2-Aminoindan (2-AI)			MDAI
		Methiopropamine (MPA)			5-APB, 6-APB
		Ethylphenidate			

LSD & TRYPTAMINES

REF: IDT-LSD-xx

		LSD & DMT, DET (2-Me-DET, 4-HO-DET), Ergotamine, 5-MeO-DIPT, 5-MeO-MIPT, 5-MeO-AMT, 5-MeO-DMT, 5-MeO-DALT
--	--	---

ECSTASY / MDMA

REF: IDT-ECS-xx

+ (Meth) Amphetamine

		Ecstasy (MDMA)			Amphetamine MethAmphetamine
--	--	----------------	--	--	-----------------------------

FENTANYL / OXYCODONE

REF: IDT-FENOX-xx

	Fentanyl / Oxycodone
--	----------------------

GHB / GBL

	GHB		GBL
REF: IDT-GHB-xx		REF: IDT-GBL-xx	

HEROIN / MORPHINE

REF: IDT-OPI-xx

	Heroin		Opium		Morphine		Codeine
--	--------	--	-------	--	----------	--	---------

KETAMINE

REF: IDT-KET-xx

	Ketamine & PCP (MeO-PCP, Methoxetamine, N-Ethyl-Ketamine, Tiletamine)		Negative
			Négatif
			Negativo
			Negativ

KHAT (KAT, QAT, GHAT, CHAT)

		Fresh Khat	REF: IDT-FKH-xx
		Dried Khat	REF: IDT-DKH-xx

PMA / PMMA

REF: IDT-PMA-xx

		PMA/ PMMA			Ecstasy (MDMA)
--	--	-----------	--	--	----------------

PRESCRIPTION DRUGS

REF: IDT-PDR-xx

	Oxycodone (OxyContin®, Percocet®)		Methylphenidate (Ritalin®)
	Methaqualone (Mandrax®)		Pethidine (Demerol®)

PSILOCYBIN & PSILOCIN

REF: IDT-PSIL-xx

	Psilocybin		Psilocin
--	------------	--	----------

SYNTHETIC CANNABINOIDS

REF: IDT-SYCA-xx

	JWH-018, JWH-019, JWH-073, JWH-081, JWH-122, AM-2201, AB-001, UR-144, Mix*		AM-2233, JWH-200 RCS-4, XLR-11, Mix*
	JWH-250, AKB-48 & STS-135		URB-597
	AM-694		CP-47, 497
	CP-55, 940		


* mixtures of several cannabinoids / mélanges de plusieurs cannabinoïdes / mezclas de varios cannabinoïdes / Mischungen aus mehreren Cannabinoiden / miscela di diversi cannabinoïdi

SYNTHETIC CATHINONES

REF: IDT-SCAT-xx

	Mephedrone (4-MMC) Pentetone, Butylone, α-PVP Naphyrone, Buphedrone		MDPV
	3-MMC, 4-MEC, 4-MeMABP 3,4-DMMC		Methylone (bk-MDMA)

INSTRUCTIONS

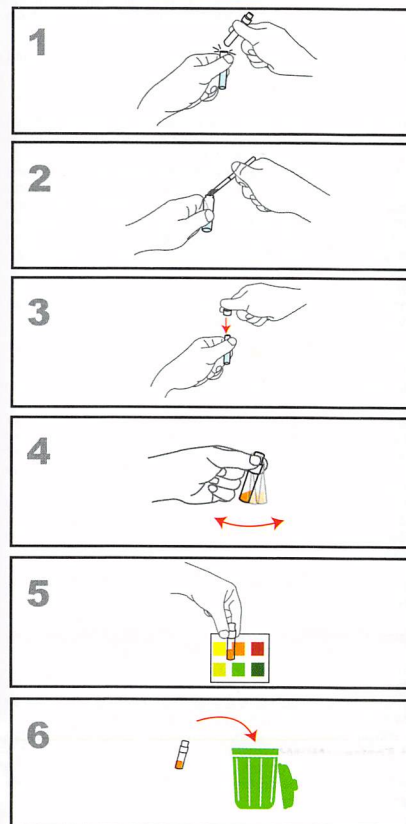

English



Intended use of NarcoCheck® ID-Test®

NarcoCheck® ID-Test® is a rapid qualitative test to help identify presumptive drugs or suspicious substances. It is intended to be used by laboratories, law enforcement agencies, associations working to reduce the risks associated with drug use, and anyone looking to identify a suspicious substance.

Instructions

1. Prepare 5mg (roughly the size of half a grain of rice) of the substance to identify. You can break in powder the compact pieces with the small hammer located at the end of the spatula provided. Hold the ampoule in the upright position and snap off the top plastic part, using index finger and thumb as indicated on picture n°1.
2. By maintaining the opened ampoule in the upright position, insert the sample into the ampoule as indicated on picture n°2. **Note** : some ID-Test® (THC, DKH) have a small granule inside of the plastic cap which is a catalyst and also needs to be added into the ampoule.
3. **Carefully** place the plastic cap on the opened ampoule, as indicated on picture n°3. **BEWARE**: make sure that the ampoule is well away from your face, because it can happen that the cap pops up under the pressure of the chemical reaction.
4. **Gently** shake and turn the ampoule to allow the sample and the reagent/granules to mix, as indicated on picture n°4. Any color change should be fully developed within 1 minute.
5. Compare the color change (if any) with the colors on the color chart included in the leaflet in order to identify the substance, as indicated on picture n°5.
6. You can then dispose of everything into a rubbish bin without any harm to the environment.

If the ampoule changes color :

- either, the color matches one of the colors referenced in the colorimetric legend. The test is then positive for the corresponding drug or substance.

• or, the color is uncertain or different from those referenced in the colorimetric legend. The test can then be simply negative for the substance researched or positive for a combination of several substances. Indeed, the positive reaction to one substance may be hidden or modified by the presence of another, which may produce unexpected colorations.

If the ampoule does not change color:

This means the tested sample does not contain any substance indicated on the color chart.

Important warnings

- Regardless of the result obtained, extreme vigilance is required, as:
- The sample may contain harmful substances not identified or not referenced in the colorimetric legend.
 - It is possible that a procedural or handling error, as well as the unexpected interference of certain substances, such as certain cutting products, may cause an erroneous result. The use of this test must be done with the full knowledge that no rapid test can be 100% reliable.
 - The results obtained by this test must be confirmed by a reference analytical method such as GC/MS and HPLC-MS/MS.
 - This test can not give any indication on the quantity or proportion of active ingredient in the sample analyzed.

For these reasons, NarcoCheck® cannot be held responsible for any damage or accident that may result from the use of this test.

The possession and use of drugs is prohibited by law.

Important note:

This test is a professional device to help identify presumptive samples of drugs or narcotics in the form of powders (fine or agglomerated) crystals, tablets, plants or liquids. It is not intended to test «anything and everything» (food products, beverages, biological materials etc.), and in particular everyday products (household, cosmetics, gardening, etc.), which contain chemical compounds that can cause unexpected color reactions.

Storage advice:

- Store these tests in their original packaging, below 35°C (95°F) and protected from sun light.
- Keep out of reach of children.
- To avoid any risk of cutting, use the protective plastic tip to open the ampoule.
- **Avoid eye, mouth, nose or skin contact with the reagents contained in the ampoule, which may cause irritation (first aid measure: rinse thoroughly with water). Use gloves.**
- Do not ingest or inhale the reagents contained in the ampoule.
- Do not use after the expiration date.

More information

For more information on the nature and dangers of substances identified by this test, please go to www.narcocheck.com or send us your question by email to id-test@narcocheck.com.

Français



Principe du Narcocheck® ID-Test®

Le NarcoCheck® ID-Test® est un test rapide qualitatif d'aide à l'identification de drogues présumées ou de substances suspectes. Il est destiné aux laboratoires, forces de l'ordre, associations oeuvrant à la réduction des risques liés à la consommation de drogues, ainsi qu'à toute personne cherchant à identifier une substance inconnue ou suspecte.

Mode d'emploi

1. Préparez 5mg (environ la taille d'un demi-grain de riz) de la substance à identifier. Vous pouvez réduire en poudre les morceaux compacts à l'aide du marteau situé au bout de la spatule fournie. Puis, tenez l'ampoule à la verticale et cassez la partie supérieure (à l'aide du bouchon plastique protecteur) avec votre index et votre pouce, comme indiqué sur la figure n°1.

2. En maintenant l'ampoule ouverte dans la position verticale, insérez l'échantillon dans l'ampoule comme indiqué sur la figure n°2.

Remarque : certains ID-Test® (THC, DKH) ont une petite pastille à l'intérieur de la capsule en plastique. C'est un catalyseur qui doit également être ajouté dans l'ampoule.

3. Fixez le capuchon fermement sur l'ampoule ouverte. **Attention** : veillez à ce que l'ampoule soit bien éloignée de votre visage, car il peut arriver que le capuchon saute sous la pression de la réaction chimique.

4. Secouez l'ampoule doucement pendant quelques secondes pour faciliter le mélange. S'il y a une réaction, elle devrait intervenir en moins d'une minute.

5. Comparez le changement de couleur (s'il a lieu) à la légende colorimétrique incluse dans cette notice pour identifier la substance en présence.

6. Vous pouvez ensuite jeter le tout à la poubelle sans risque pour l'environnement.

ampoule change de couleur :

- soit, la couleur obtenue correspond à l'une des couleurs référencées dans la légende colorimétrique. Le test est alors positif pour la drogue ou la substance correspondante.
- soit, la couleur est incertaine ou différente de celles référencées dans la légende colorimétrique. L'échantillon peut alors être simplement négatif pour la substance recherchée ou positif à une combinaison de plusieurs substances. La réaction positive à une substance peut en effet être masquée ou modifiée par la présence d'une autre, ce qui peut produire des colorations imprévues.

Si l'ampoule ne change pas de couleur :

Cela signifie que le test n'a identifié aucune substance répertoriée dans la légende colorimétrique.

Avertissements importants et clauses de non-responsabilité

Quel que soit le résultat obtenu, une extrême vigilance reste requise, car :

- L'échantillon peut contenir des substances nocives non identifiées ou non référencées dans la légende colorimétrique.
- Il se peut qu'une erreur de procédure ou de manipulation, de même que l'interférence inopinée de certaines substances, comme certains produits de coupe, puissent provoquer un résultat erroné. L'utilisation de ce test doit se faire en toute connaissance du fait qu'aucun test rapide ne peut être fiable à 100%.
- Les résultats obtenus par ce test doivent impérativement être confirmés par une méthode analytique de référence comme la GC/MS et la HPLC-MS/MS.
- Ce test ne peut donner aucune indication sur la quantité ou la proportion de principe actif dans l'échantillon analysé.

Pour ces raisons, NarcoCheck® ne peut être tenu pour responsable des éventuels dommages et accidents pouvant résulter de l'utilisation de ce test.

La possession et l'usage de stupéfiants sont interdits par la loi.

Précision :

Ce test est un dispositif professionnel d'aide à l'identification d'échantillons présumés de drogues ou stupéfiants, qui se présenteraient sous forme de poudres (fines ou agglomérées), cristaux, comprimés, plantes ou liquides. Il n'a pas vocation à tester «tout et n'importe quoi» (produits alimentaires, boissons, matières biologiques etc.), et notamment des produits de la vie courante (ménagers, cosmétiques, phytosanitaires etc.), qui contiennent des composés chimiques pouvant provoquer des réactions colorées inopinées.

Conservation et mesures de protection :

Conservez ces tests dans leur emballage d'origine, à une température inférieure à 35°C (95°F) et à l'abri de la lumière du soleil. Garder hors de portée des enfants.

Afin d'éviter tout risque de coupure, utilisez l'embout plastique protecteur pour ouvrir l'ampoule.

Évitez tout contact oculaire, buccal, nasal ou cutané avec les réactifs contenus dans l'ampoule, qui peuvent provoquer une irritation (mesure de premiers secours : rincer abondamment à l'eau). Le port de gants est recommandé.

Ne pas ingérer ou inhaler les réactifs contenus dans l'ampoule.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur la nature et les dangers des substances identifiables par ce test, veuillez-vous rendre sur www.narcocheck.com ou faites-nous parvenir votre question par mail id-test@narcocheck.com.

Español



¿Se ha considerado del test de identificación NarcoCheck® ID-Test®:

El test de identificación NarcoCheck® es una prueba cualitativa rápida que ayuda a identificar presuntas drogas o sustancias sospechosas. Está destinado a los laboratorios, a las fuerzas del orden, a las asociaciones que promueven la reducción de riesgos relacionados con el consumo de drogas, y a cualquier persona que desee identificar una sustancia sospechosa.

Instrucciones

Prepáre 5mg (aproximadamente del tamaño de medio grano de arroz) de la sustancia a analizar. Puede romper las piezas compactas con el martillo pequeño que se encuentra en el extremo de la espátula suministrada. Sostenga la ampolla en posición vertical rompa la parte superior (mediante el terminal de plástico anticorte) con su índice y pulgar, tal como está indicado en la Figura 1.

Sujetando la ampolla abierta en posición vertical, inserte la muestra en la ampolla valiéndose de la espátula incluida en el kit, como está indicado en la Figura 2. **Observación:** algunos ID-Test® (THC, DKH) contienen un catalizador dentro de la cubierta de plástico que también hay que insertar en la ampolla.

Fije la cubierta de plástico **firmemente** en la ampolla abierta.

Atención: mantenga la ampolla lejos de su rostro ya que puede ocurrir que la cubierta salte bajo la presión de la reacción química.

4. Agite la ampolla **suavemente** algunos segundos para facilitar la mezcla. Si hay reacción, ésta debería ocurrir en menos de un minuto.

5. Compare el cambio de color (si procede) con la leyenda colorimétrica incluida en este folleto para identificar la sustancia presente.

6. Al finalizar, se puede tirar todo a la basura sin ningún riesgo para el medio ambiente.

Si la ampolla cambia de color :

- o bien, el color corresponde a uno de los colores referenciados en la leyenda colorimétrica. La prueba es entonces positiva para la droga o sustancia correspondiente.
- o, el color es incierto o diferente de los referidos en la leyenda colorimétrica. En este caso, la prueba puede ser simplemente negativa para la sustancia buscada o positiva para una combinación de varias sustancias. De hecho, la reacción positiva a una sustancia puede verse enmascarada o modificada por la presencia de otra, que puede producir coloraciones inesperadas.

Si la ampolla no cambia de color :

Significa que la muestra analizada no contiene ninguna de las sustancias indicadas en la tabla de colores.

Advertencias y avisos importantes

Sea cual sea el resultado, hay que extremar la vigilancia, ya que :

- La muestra puede contener sustancias nocivas no identificadas o no referenciadas en la leyenda colorimétrica.
- No existe el riesgo de un error de procedimiento o de manipulación, así como la interferencia inesperada de ciertas sustancias, como ciertos productos de corte, puedan provocar un resultado erróneo. El uso de esta prueba debe hacerse con el conocimiento de que ninguna prueba rápida puede ser 100% confiable.
- Los resultados obtenidos por esta prueba deben ser confirmados por un método analítico de referencia (GC/MS y HPLC-MS/MS).
- Esta prueba no puede dar ninguna indicación sobre la cantidad o proporción de ingrediente activo en la muestra analizada.

Por estas razones, NarcoCheck® no se hace responsable de cualquier daño o accidente que pueda resultar del uso de esta prueba.

La posesión y el consumo de drogas están prohibidos por la ley.

Nota importante :

Esta prueba es un dispositivo profesional para ayudar a la identificación de **muestras presuntas de drogas o estupefacientes** en forma de polvos (finos o aglomerados), cristales, tabletas, plantas o líquidos. No está pensado para probar «cualquier cosa» (productos alimentarios, bebidas, materiales biológicos, etc.) y, en particular, productos de uso cotidiano (domésticos, cosméticos, fitosanitarios, etc.), que contienen compuestos químicos que pueden provocar reacciones cromáticas inesperadas.

Medidas de conservación y protección:

- Guarde estas pruebas en su embalaje original, a menos de 35°C (95°F) y protegidas de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para evitar cualquier riesgo de corte, utilice la punta de plástico protectora para abrir la ampolla
- Evitar el contacto de los reactivos contenidos en la ampolla con los ojos, la boca, la nariz o la piel, ya que pueden causar irritación (medida de primeros auxilios: aclarar con abundante agua). Usar guantes.
- No ingerir ni inhalar los reactivos contenidos en la ampolla.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

Más información

Para obtener más información sobre la naturaleza y los peligros de las sustancias identificadas por esta prueba, visite www.narcocheck.com o envíenos su pregunta por correo electrónico a id-test@narcocheck.com.

Deutsch



Wozu dient dieser Test?

Der NarcoCheck® ID-Test® ist ein qualitativer Schnelltest, der bei der Identifizierung von vermuteten Drogen oder verdächtigen Substanzen hilft. Es ist für Labore, Strafverfolgungsbehörden, Verbände, die sich für die Risikoreduzierung im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum einsetzen, sowie für alle, die eine verdächtige Substanz identifizieren wollen, bestimmt.

Anleitung

1. Bereiten Sie 5mg (etwa der Größe eines halben Reiskorns) der Substanz zu analysieren. Sie können die kompakten Stücke mit dem kleinen Hammer am Ende des mitgelieferten Spachtels brechen. Halten Sie die Ampulle zwischen dem Daumen und Zeigefinger fest und brechen Sie die Spitze am genarhten Rand ab, wie in Illustration n. 1 gezeigt.

2. Halten Sie die Ampulle stets senkrecht, und fügen Sie die Probe in die Ampulle ein. Dafür können Sie den im Set beigefügten Spatel benutzen. **Hinweis:** In der Plastikverschlusskappe von mehreren ID-Test® (THC, DHK) befindet sich ein Katalysator, das nach

dem Füllen mit dem zu prüfenden Material in der Ampulle gemischt werden muss.

3. Verschließen Sie die Ampulle mit der Plastikverschlusskappe fest. **Achtung:** Halten Sie die Ampulle weit entfernt von Ihrem Gesicht, da der Kunststoffverschluss unter dem Druck der chemischen Reaktion springen könnte.

4. Schütteln Sie die Ampulle **langsam** um die Mischung zu fördern. Wenn es eine Reaktion gibt wird sie in weniger als eine Minute geschehen.

5. Vergleichen Sie die in der Ampulle erhaltene Farbe mit der Farblegende im Beipackzettel.

6. Du kannst dann das ganze Ding in den Müll werfen, ohne die Umwelt zu gefährden.

Wenn sich die Farbe der Ampulle verändert:

- entweder entspricht die Farbe einer der Farben, auf die in der Farbmessungslegende verwiesen wird. Der Test ist dann positiv für die entsprechende Droge oder Substanz.
- oder, die Farbe ist unsicher oder unterscheidet sich von den in der Farblegende angegebenen Farben. In diesem Fall kann der Test einfach negativ für die gesuchte Substanz oder positiv für eine Kombination von mehreren Substanzen sein. In der Tat kann die positive Reaktion auf eine Substanz durch das Vorhandensein einer anderen maskiert oder modifiziert werden, was zu unerwarteten Färbungen führen kann.

Wenn sich die Farbe der Ampulle nicht verändert:

Es heißt dann, dass die untersuchte Probe kein von denen auf den Beipackzettel aufgelisteten Rausch- oder Streckmittel enthält.

Wichtige Warnhinweise und Haftungsausschlüsse

Unabhängig vom Ergebnis ist weiterhin äußerste Wachsamkeit geboten, denn :

- Die Probe schädliche Substanzen enthalten kann, die nicht identifiziert wurden oder auf die in der kolometrischen Legende nicht hingewiesen wird.
- Es ist möglich, dass ein Verfahrens- oder Handhabungsfehler sowie die unerwartete Interferenz bestimmter Substanzen, wie z. B. bestimmter Schneideprodukte, ein fehlerhaftes Ergebnis verursachen. Die Anwendung dieses Tests muss mit dem Wissen erfolgen, dass kein Schnelltest 100% zuverlässig sein kann.
- Die mit diesem Test erzielten Ergebnisse müssen durch eine analytische Referenzmethode wie GC/MS und HPLC-MS/MS bestätigt werden.
- Dieser Test kann keinen Hinweis auf die Menge oder den Anteil des Wirkstoffs in der untersuchten Probe geben.

Aus diesen Gründen kann NarcoCheck® nicht für Schäden oder Unfälle verantwortlich gemacht werden, die durch die Verwendung dieses Tests entstehen können.

Der Besitz/Gebrauch von Betäubungsmitteln ist gesetzlich verboten.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Test ist ein professionelles Gerät zur Unterstützung bei der Identifizierung von **Drogen- oder Betäubungsmittelverdachtsproben** in Form von Pulvern (fein oder agglomeriert), Kristallen, Tabletten, Pflanzen oder Flüssigkeiten. Es ist nicht für die Prüfung von «allem und jedem» (Lebensmittel, Getränke, biologische Materialien usw.) und insbesondere von Alltagsprodukten (Haushalt, Kosmetika, Pflanzenschutzmittel usw.) gedacht, die chemische Verbindungen enthalten, die unerwartete Farbreaktionen hervorrufen können.

Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen:

- Lagern Sie diese Tests in der Originalverpackung unter 35°C (95°F) und schützen Sie sie vor Sonnenlicht.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie zum Öffnen der Ampulle die schützende Kunststoffspitze, um jede Schnittgefahr zu vermeiden
- Vermeiden Sie Augen-, Mund-, Nasen- und Hautkontakt mit den in der Ampulle enthaltenen Reagenzien, die zu Reizungen führen können (Erste-Hilfe-Maßnahme: gründlich mit Wasser spülen). Verwenden Sie Handschuhe.
- Die in der Ampulle enthaltenen Reagenzien dürfen nicht verschluckt oder eingeatmet werden.
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu Art und Gefahren der durch diesen Test identifizierten Substanzen erhalten Sie unter www.narcocheck.com oder senden Sie uns Ihre Frage per E-Mail an id-test@narcocheck.com.

Italiano



Uso previsto del NarcoCheck® ID-Test®:

Il NarcoCheck® ID-Test® è un test qualitativo rapido che aiuta a identificare droghe presunte o sostanze sospette. È destinato all'uso da parte di laboratori, forze dell'ordine, associazioni che promuovono la riduzione del rischio legato all'uso di droghe, e chiunque cerchi di identificare una sostanza sospetta.

1. Preparare 5mg (circa la dimensione di mezzo chicco di riso) della sostanza da identificare. I pezzi compattati possono essere macinati in polvere usando il martello all'estremità della spatola fornita. Tenere la fiala in posizione verticale e rompere la parte superiore (con l'aiuto della ghiera di plastica anti-taglio) con l'indice e il pollice, come indicato nella figura 1.

2. Tenendo la fiala aperta in posizione verticale, inserirvi il campione con l'aiuto della spatola inclusa nel kit, come indicato nella figura 2. **Nota:** alcuni ID-Test® (THC, DKH) contengono un catalizzatore all'interno del cappuccio di plastica che deve essere ugualmente inserito nella fiala.

3. Fissare **fermamente** il cappuccio di plastica sulla fiala aperta. **Attenzione:** tenere la fiala lontano dal viso, poiché può succedere che il cappuccio salti per effetto della pressione della reazione chimica.

4. Scuotere **delicatamente** la fiala alcuni secondi per favorire la miscelazione. Se c'è reazione, dovrebbe avvenire in meno di un minuto.

5. Confrontare il cambiamento di colore (se ha luogo) con la scala colorimetrica compresa nelle presenti istruzioni per identificare la sostanza di cui si è in presenza.

6. Dopo l'uso, anche se i test di identificazione non richiedono l'utilizzo di un neutralizzatore di acido (dato che la neutralizzazione avviene automaticamente all'interno della fiala), consigliamo di mettere la fiala usata dentro un sacchetto con chiusura a zip (incluso nel kit) e di richiuderlo. In seguito si può gettare tutto nei rifiuti domestici.

Se la fiala assume un diverso colore:

- o, il colore corrisponde a uno dei colori referenziati nella legenda colorimetrica. Il test è quindi positivo per la droga o la sostanza corrispondente.
- oppure, il colore è incerto o diverso da quelli indicati nella legenda colorimetrica. In questo caso, il test può essere semplicemente negativo per la sostanza ricercata o positivo per una combinazione di più sostanze. Infatti, la reazione positiva a una sostanza può essere mascherata o modificata dalla presenza di un'altra, che può produrre colorazioni inaspettate.

Se la fiala non assume una diversa colorazione:

Ciò significa che il campione esaminato non contiene alcuna delle sostanze indicate nella tabella dei colori.

Avvertenze importanti / Esclusione di responsabilità

Indipendentemente dal risultato ottenuto, è necessaria un'estrema vigilanza, poiché :

- Il campione può contenere sostanze nocive non identificate o non menzionate nella legenda colorimetrica.
- È possibile che un errore procedurale o di manipolazione, così come l'interferenza imprevista di alcune sostanze, come alcuni prodotti da taglio, possano causare un risultato errato. L'uso di questo test deve essere fatto con la consapevolezza che nessun test rapido può essere affidabile al 100%.
- I risultati ottenuti con questo test devono essere confermati da un metodo analitico di riferimento come GC/MS e HPLC-MS/MS.
- Questo test non può dare alcuna indicazione sulla quantità o proporzione di principio attivo nel campione analizzato.

Per questi motivi, NarcoCheck® non può essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno o incidente che possa derivare dall'uso di questo test.

Il possesso e l'uso di droghe è proibito dalla legge.

Nota importante :

Questo test è un dispositivo professionale che aiuta nell'identificazione di **campioni presunti di droga o narcotici** sotto forma di polveri (fini o agglomerate), cristalli, compresse, piante o liquidi. Non è destinato a testare «tutto e niente» (prodotti alimentari, bevande, materiali biologici, ecc.), e in particolare i prodotti di uso quotidiano (casalinghi, cosmetici, prodotti fitosanitari, ecc.), che contengono composti chimici che possono causare reazioni cromatiche impreviste.

Istruzioni di conservazione e misure di protezione:

- Conservare questi test nella loro confezione originale, al di sotto dei 35°C (95°F) e al riparo dalla luce del sole.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare qualsiasi rischio di taglio, utilizzare la punta di plastica protettiva per aprire la fiala
- Evitare il contatto di occhi, bocca, naso o pelle con i reagenti contenuti nella fiala, che possono causare irritazioni (misura di primo soccorso: sciacquare abbondantemente con acqua). Si raccomanda di indossare dei guanti.
- Non ingerire o inalare i reagenti contenuti nella fiala.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non conoscete la sostanza indicata?

Il presente opuscolo non ha il solo scopo di fornire informazioni approfondite sulle diverse sostanze elencate nei risultati e sui loro effetti. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.narcocheck.com o contattate il nostro servizio clienti: id-test@narcocheck.com.